



Plafonds soufflants P-BOX

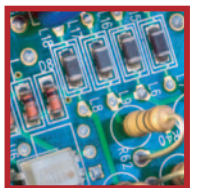

Le souffle protecteur

www.noroitlabo.com

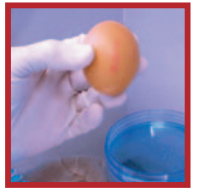

**P-BOX : Une zone de protection optimale,
un équipement modulable.**



Mise en service :

Noroit détache une équipe de techniciens sur site pour réaliser l'installation et la validation complète de l'équipement. Nous réalisons :

- Le contrôle de la qualité particulaire de l'air, au compteur de particules, précision 0,3 µm.
- Le contrôle de l'absence d'induction extérieure, à la poire à fumée.
- Le contrôle de l'efficacité des filtres absolus.
- L'établissement d'une cartographie de vitesse du flux dans le volume de travail.
- La vérification des alarmes.

Les dossiers de qualification usine et de mise en route vous sont remis, à l'issue de ces contrôles.



Entretien / SAV:

Nous vous proposons un contrat d'entretien annuel, englobant la vérification du flux et le contrôle des filtres.

La maintenance des appareils est réalisée par des techniciens Noroit, spécialement formés.

Les pièces détachées, filtres et pré-filtres, sont tenus en stock.

NOROIT

"Rezé Créatic", 2 rue Robert Schuman
44408 Rezé cedex

Tel : 02.40.50.12.77 - Fax : 02.51.70.20.25

contact@noroitlabo.com
www.noroitlabo.com